


# BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, tre-komponentsprøjte



- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Siliconebehandlet for jævn stempelgang
- Ergonomisk udformet stempelstang for sikkert greb
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Dobbelte stempelringe forhindrer lækage
- Ingen lækage selv ved højt tryk
- 100-ml-sprøjten med kateterspids kan ændres til Luer-fitting ved hjælp af en medfølgende adapter
- Den ravgule 50-ml-sprøjte beskytter lysfølsomme lægemidler
- Latexfri emballage eliminerer risikoen for overfølsomhedsreaktioner

## Anvendelse

- 50-ml-Luer-Lok™ -sprøjterne er specielt udformede til automatiske sprøjtepumper og passer til de mest udbredte sprøjtepumper på markedet (se kompatibilitetslisten i appendiks)

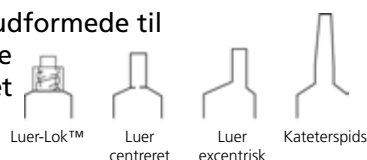

## Sprøjter uden kanyle

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
20	Luer/excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/centreret	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300865
60	Luer-Lok™/centreret	1	40/160	309653
50 perfusion	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300137
50 ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300869
50 perfusion ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300139

## Sprøjter med Kateterspids

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50	Kateterspids/centreret	1	60/240	300867
100	Kateterspids/centreret	2	25/50	300605

## Sprøjter med aftagelig kanyle

Volumen ml	Kanylestørrelse G x tommer	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50 perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 perfusion ravgul	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

### Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen  
 Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)  
 Overfladebehandling: siliconeolie  
 Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen  
 Kanyle: rustfrit stål (AISI 304)  
 Lim: epoxyresin  
 Overfladebehandling: siliconeolie

### Emballagemateriale

Papir  
 Transparent plastfilm (polyethylen/polyamid)  
 Bølgepap



**Steriliseringsmetode**  
 Ethylenoxid



5 år

**CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF**  
 (sprøjte Luer: klasse I)  
 (sprøjte Luer-Lok™: klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people  
 live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark  
 Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.  
 2620 Albertslund  
 Tlf.: 43 43 45 66  
 www.bd.com